


Importante

- Realice la prueba en las próximas 2 semanas.
- Incluya el formulario en el sobre cuando devuelva las muestras.


Instrucciones del kit de prueba casera

Tome dos pequeñas muestras, envíelas por correo y listo.

El kit contiene todo lo necesario
para realizar la prueba

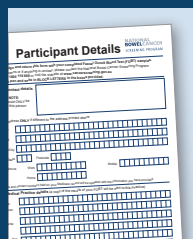

1 x formulario
de datos del
participante

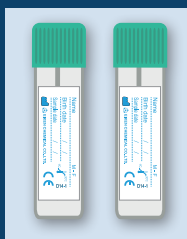

2 x tubos de
recolección



2 x forros
de inodoro



1 x bolsa
de plástico
sellada



1 x sobre con
franqueo
pagado

! Antes de realizar la prueba

- ✓ Coloque la prueba junto al inodoro, donde se acordará de hacerla.
- ✓ Ponga un recordatorio para los días en que vaya a tomar las muestras.
- ✓ Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior del kit. Si el kit ha caducado, llame al 1800 627 701 para solicitar uno nuevo.
- ✓ Siga tomando sus medicamentos y coma como de costumbre.

No haga la prueba si tiene:

- ✗ almorranas (hemorroides) que sangran. Si esto ocurre, acuda a su médico
- ✗ sangre en su orina o en el inodoro. Si esto ocurre, acuda a su médico
- ✗ su menstruación. Haga la prueba 3 días después de que haya terminado su menstruación
- ✗ se haya hecho una colonoscopia recientemente.

✉ Su resultado

El resultado se le enviará por correo a usted y a su médico en un plazo de cuatro semanas a partir de que envíe las muestras

Un resultado **negativo** significa que no se ha encontrado sangre. Debería repetir la prueba dentro de 2 años.


Un resultado **positivo** significa que se ha encontrado sangre. Esto no siempre significa que tenga cáncer de intestino. Hay muchas razones por las que puede haber sangre en su caca, y la mayoría no están relacionadas con el cáncer. Haga una cita con su médico lo antes posible para obtener más información.

Vea un vídeo sobre cómo realizar la prueba
www.health.gov.au/nbcsp



Instrucciones

1 Preparación

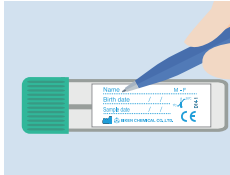

Escriba su nombre, fecha de nacimiento y fecha en que hace la prueba en uno de los tubos.




Haga pipí y tire de la cadena.

Coloque el forro de inodoro con la inscripción hacia arriba. No importa si se moja.

2 Recolección



Haga caca en el forro.

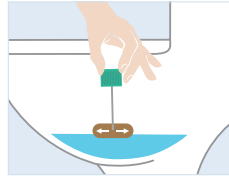

Gire para abrir el tubo. Mueva la punta del palito por la caca. Basta con que la muestra sea pequeña.

Vuelva a introducir el palito en el tubo y ciérrelo. Tire el forro biodegradable en el inodoro.

3 Repetir




Repita los pasos 1 y 2 usando el otro tubo cuando haga su próxima caca. Lo ideal es intentar recoger ambas muestras con 3 días de diferencia.


Vaya al paso 4.

4 Enviar

Envíe sus muestras por correo lo antes posible.

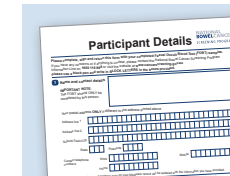


Rellene el formulario de datos del participante. Escriba las fechas en que se tomaron las muestras y firme el formulario.

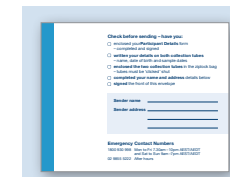

En el sobre, firme el anverso y escriba su nombre y dirección en el reverso.

Coloque el formulario y las muestras en el sobre.

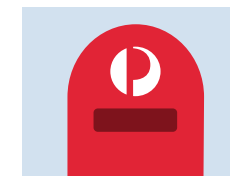

Envíe el sobre por correo. Las muestras deben mantenerse frías el mayor tiempo posible. Coloque el sobre en un buzón en las horas más frescas del día o llévalo a una oficina de correos.

? Preguntas

Línea de ayuda para kits de prueba (Test Kit Helpline): 1800 930 998.

Registro nacional de detección del cáncer (National Cancer Screening Register): 1800 627 701.

Visite nuestro sitio web: www.health.gov.au/nbcsp.



Traducciones

Para obtener información en su idioma www.health.gov.au/nbcsp-translations.

Servicios de idiomas y traducción: 13 14 50.

PATHOLOGY SERVICES



SPONSOR



MANUFACTURER

